


M2720A Avalon CTS Sistema de Transductores Fetales Inalámbricos

Avisos y qué hacer en caso de que aparezcan

Avisos de la estación base:  parpadea, solo o con luces de otro lado.  significa que la luz está apagada o encendida de manera permanente.

Avisos del transductor:  indica que se oirá una alarma sonora, si está ajustada. Pulse  para silenciarla.

 parpadea junto con el símbolo que representa el origen del problema.

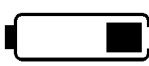Si aparece este aviso...		...haga lo siguiente...
...en la estación base...	...en el transductor...	
   + 		Acople el transductor para recargar la batería o sustituya el transductor por un transductor cargado.
   + 	 + 	Si el problema continúa después de un período de carga de 30 minutos, cambie la batería del transductor. (Consulte la <i>Guía de Mantenimiento</i>).
   + 		Compruebe que el transductor está activo y dentro del campo operativo. Compruebe la conexión de la antena.
  	 + 	Pulse  durante dos segundos, para desbloquear un acoplamiento bloqueado.
 Rótulo de cama de ejemplo	 +  + --	Este acoplamiento ya tiene un transductor activo (que muestra el rótulo de cama 38 en este ejemplo).
 Rótulo de cama de ejemplo	 +  + 16 Rótulo de cama de ejemplo	Acople este transductor en primer lugar para que el acoplamiento quede disponible <i>O bien</i> , si el transductor muestra un rótulo de cama (16 en este ejemplo), devuélvalo a su estación base.
	 + 	Llame a Soporte Técnico (el transductor no pudo registrarse).
	 + 	Si activa el transductor de ECG, conecte el cable. Coloque el transductor en el acoplamiento de acuerdo con la posición indicada por el punto (el transductor está en el acoplamiento incorrecto).
Mensajes de error de la estación base y del transductor (de E0 a E9): Consulte las <i>Instrucciones de Uso</i>		







M2720A Avalon CTS Sistema de Transductores Fetales Inalámbricos

Guía de Inicio Rápido

1 110 - 240 V CA

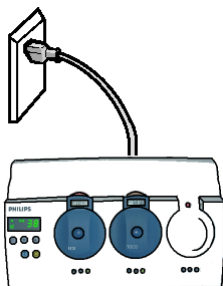

2 Encendido

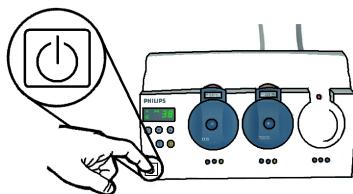

3

TELE


Compruebe que el monitor fetal muestra "TELE", lo cual indica que hay una buena conexión con el Avalon CTS

4 Espere a que se encienda la luz de "listo"



5

Extraiga el transductor

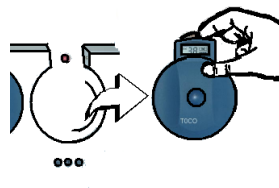


La luz de "listo" se apagará: se encenderá la luz de "enlace de RF"



6

Aplique el transductor (utilice gel para ultrasonidos)

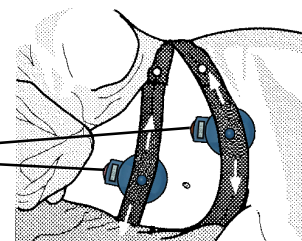

Luego fije la posición cuando tenga una buena señal:



para monitores Avalon



para monitores Series 50

Cómo cambiar de monitorización por ultrasonidos a ECG directo

1	Acople el transductor US.
2	Extraiga el transductor de ECG cuando la luz  correspondiente a ese acoplamiento esté en verde.
3	Conecte el cable adaptador de ECG directo y el electrodo fetal para cuero cabelludo al transductor de ECG.
4	Inicie la monitorización de ECG directo.

Cómo cambiar de monitorización mediante ECG directo a US

1	Desconecte el cable adaptador de ECG directo y el electrodo fetal para cuero cabelludo del transductor de ECG.
2	Acople el transductor de ECG.
3	Extraiga el transductor US cuando la luz  correspondiente a ese acoplamiento esté en verde.
4	Inicie la monitorización por ultrasonidos.

Desconecte todos los transductores fetales con cables del monitor antes de utilizar el Avalon CTS.

Dos transductores activos que transmitan una FCF a la misma estación base provocarán el mensaje de error **E9**. Para cancelarlo, acople un transductor.

Después de su uso: limpie los transductores. A continuación, acóplelos en el acoplamiento de la estación base correspondiente.